

Wirówka Do Retencji Wody

Kod: P.600.xxxx

Zastosowanie

Wirówka do badań retencji wodnej próbek pulpy.

Obowiązujące normy

- ISO 23714

Opis urządzenia


Wirówka Do Retencji Wody PTE Austria, to standardowa wirówka z rotorem 4 x 100 ml i specjalnymi naczyniami do próbek pulpy.

Opis procesu

Próbka pulpy jest ważona, a następnie umieszczana w specjalnych zbiornikach na próbki. Następnie odwirowuje się zbiorniki z pulpą w środku. Po odwirowaniu, próbkę ponownie waży się i oblicza pozostałą wodę w pulpie.

Specyfikacje

- wirówka z rotorem na próbki 4 x 100 ml
- specjalnie skonstruowane zbiorniki na próbki
- max. prędkość 5000 obr. /min

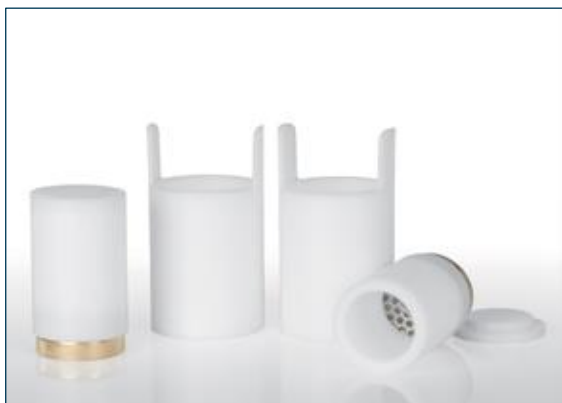

Kosze odwadniające



Połączenia

- Elektryczne: 230 V, 50 Hz AC
(inne napięcia możliwe na zamówienie)

Modele

Kod	Urządzenie
P.600	Wirówka Do Retencji Wody bez układu chłodzenia
P.600.COOL	Wirówka Do Retencji Wody z układem chłodzenia

Parametry

Wymiary	Waga
460 x 600 x 355 mm	58 kg